

TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ

Elaborador: Angela Carmem Morandi	Departamento de Atenção Básica Código:POP-Q-DAB- 41
Revisor: Juliana Marisa Teruel Silveira da Silva Simone de Araujo Lopes	Revisão: 1 Data da vigência: Set/2025 a Set/2027
Aprovador: Núbia Mara Mattos	Página: 1 de 5

1. OBJETIVO

Padronizar as informações para a oferta e execução de Teste Rápido de Gravidez para diagnóstico precoce da gestação.

2. ABRANGÊNCIA


Este procedimento se aplica as Unidades de Saúde, que realizam ou disponibilizam teste rápido de gravidez.

3. RESPONSABILIDADE

Enfermeiro, técnico e auxiliar de enfermagem.

4. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Luva de procedimento;
- Frasco limpo e seco de plástico;
- Tiras reagentes para Teste Rápido HCG urinário;
- Relógio ou cronometro;
- Papel toalha.

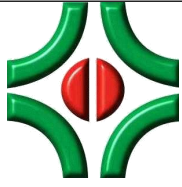

TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ


Elaborador: Angela Carmem Morandi	Departamento de Atenção Básica Código: POP-Q-DAB- 41
Revisor: Juliana Marisa Teruel Silveira da Silva Simone de Araujo Lopes	Revisão: 1 Data da vigência: Set/2025 a Set/2027
Aprovador: Núbia Mara Mattos	Página: 2 de 5

5. PRINCIPAIS PASSOS

- Explicar ao paciente, de maneira objetiva, o passo a passo para a coleta e realização do exame e sua eficácia, deixando o paciente à vontade para fazer perguntas;
- Fornecer recipiente plástico para coleta de urina;
- Acompanhar a paciente até ao banheiro para a realização da coleta urinária e verificação se a amostra recebida corresponde a paciente atendida;
- Ao receber a amostra, remover a fita de reação do sachê e colocar sobre uma superfície plana;
- Submergir a fita verticalmente na amostra até a marca indicadora;
- Deixar a tira submersa conforme orientação do fabricante;
- Remover a tira teste do contato com a amostra e colocá-la sobre uma superfície limpa, plana e seca, forrada com papel toalha;
- Ler o resultado aos 5 minutos;
- Informar à paciente sobre o resultado do teste;
- Registrar procedimento em prontuário eletrônico.

5.1 INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS

- **Negativo:** Somente uma linha aparecerá na região do controle (C) no dispositivo de reação.
- **Positivo:** Além da linha controle (C), aparecerá também uma linha na região teste (T). A intensidade da linha na região teste (T) pode variar de acordo com a concentração de hCG presente na amostra. Portanto, qualquer

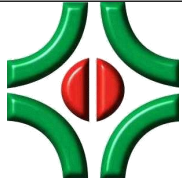

TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ

Elaborador: Angela Carmem Morandi	Departamento de Atenção Básica Código: POP-Q-DAB- 41
Revisor: Juliana Marisa Teruel Silveira da Silva Simone de Araujo Lopes	Revisão: 1 Data da vigência: Set/2025 a Set/2027
Aprovador: Núbia Mara Mattos	Página: 3 de 5


intensidade de cor na região da linha teste (T) deve ser considerada reagente.

- **Inconclusivo:** Além da linha controle (C), aparecerá também uma sombra na região teste (T) não definida como cor. Neste caso, sugere-se nova coleta em 7 dias, para confirmação do resultado.
- **Inválido:** Toda linha que, por natureza da amostra, possa aparecer depois de passados 10 minutos, não terá valor diagnóstico. Ou quando a linha controle (C) não aparecer.
- Caso não apareça nenhuma linha na zona central branca do dispositivo, o teste será inválido porque não se procedeu corretamente ou porque os dispositivos se deterioraram.

6. REALIZAÇÃO DO TESTE EM DOMICÍLIO

A entrega do insumo TRG pode ser feita à mulher adulta, jovem, adolescente ou ao acompanhante. Em qualquer das circunstâncias, o acolhimento deve ser realizado pelo profissional de saúde no sentido de garantir informação qualificada e fortalecer o vínculo com a usuária.

- Fornecer Kit com o material necessário (recipiente plástico para coleta de urina, o teste, luvas e papel toalha).
- Explicar ao interlocutor (marido, namorado, amiga, sogra ou vizinha), de maneira simples e objetiva, o passo-a-passo para a realização do TRG, fornecer orientações por escrito. Anexo II.

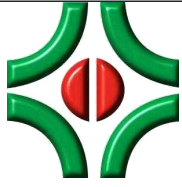

TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ

Elaborador: Angela Carmem Morandi	Departamento de Atenção Básica Código: POP-Q-DAB- 41
Revisor: Juliana Marisa Teruel Silveira da Silva Simone de Araujo Lopes	Revisão: 1 Data da vigência: Set/2025 a Set/2027
Aprovador: Núbia Mara Mattos	Página: 4 de 5

- Oferecer atendimento pós teste, para a mulher ou o casal, ofertando apoio e ajuda condução do planejamento reprodutivo do casal ou da mulher em caso de resultado negativo, assim como início do pré natal em caso positivo.
- Caso a mulher venha portando um teste positivo, fornecido para ser realizado no domicílio, repetir o teste na unidade, e a partir da confirmação da suspeição de gravidez, dar início ao pré natal.


7. QUANDO REALIZAR O TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ

É indicado para mulheres em idade fértil que apresentem atraso menstrual. O tempo de atraso para a realização do teste deve ser igual ou superior a 7 dias e não mais que 3 meses.

Em caso de mulheres que utilizam o método contraceptivo injetável, o teste rápido poderá ser indicado **se houver atraso na aplicação de mais de 7 dias do intervalo máximo**, conforme abaixo:

Uso da Medroxiprogesterona (trimestral - 90 dias): Pode ser aplicada de 83 até 91 dias a contar da última aplicação (7 dias antes e intervalo máximo de 1 dia depois).

Uso da Noretisterona + Estradiol: (mensal - 30 dias): Pode ser aplicada de 27 até 33 dias a contar da última aplicação (3 dias antes e intervalo máximo de 3 dias depois).

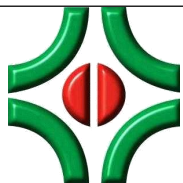

TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ

Elaborador: Angela Carmem Morandi	Departamento de Atenção Básica Código:POP-Q-DAB- 41
Revisor: Juliana Marisa Teruel Silveira da Silva Simone de Araujo Lopes	Revisão: 1 Data da vigência: Set/2025 a Set/2027
Aprovador: Núbia Mara Mattos	Página: 5 de 5

8. REFERÊNCIA

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Teste rápido de gravidez na atenção básica: Guia técnico. Brasília. DF, 2013. Disponível em https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/teste_rapido_gravidez_guia_tecnico.pdf acesso em 05 set. 2025

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. Brasília: Ministério da Saúde; Instituto Sírio-Libanês de Ensino e Pesquisa, 2016. 230 p.

FEBRASGO – Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia. Teste rápido da gravidez e suas implicações [página na internet]. São Paulo: FEBRASGO, 21 jun. 2017. Disponível em: <https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/118-teste-rapido-da-gravidez-e-suas-implicacoes>. Acesso em: 5 set. 2025.

9. ANEXOS

Anexo I – FOLHA DE TREINAMENTO DE TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ.

Anexo II – ORIENTAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO EXAME NO DOMICÍLIO.

Anexo III - FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO.

Anexo IV – MODELO DE LAUDO PARA TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ

10. ARQUIVO DISPONÍVEL EM:

1	Arquivo em PDF, localizado no link https://repositorio.cambe.pr.gov.br/index.php/s/6LSmBotJfJNZfX3?path=%2F
---	--